



# כרית עיסוי שיאצו מקצועי הוראות שימוש



היבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ  
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399  
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים



בחוברת זו כלול מידע חשוב עם הנחיות לשימוש במכשיר, יש לקרוא היטב לפני השימוש.

## סכנה

על מנת להקטין סיכון של קצר חשמלי יש לנתק את המכשיר מהחשמל מיד בתום השימוש.

## אזהרות בטיחות


1. אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל ללא השגחה. יש לנתק את המכשיר עם סיום השימוש מהחשמל.
2. אין להפעיל את המכשיר מתחת לשמיכה או כרית. חימום יתר יכול לגרום לשריפה, קצר חשמלי או פגיעות בגוף.
3. אין לתת לילדים או לאנשים בעלי מוגבלויות להפעיל את המכשיר ללא השגחה על מנת להימנע ממצבים מסוכנים.
4. יש להשתמש במכשיר רק לפי ההוראות הרשומות.
5. אין להשתמש במכשיר במקלחת, אין לגעת במכשיר שנפל למים ויש לנתקו מיידית מהחשמל.
6. אין להשתמש במכשיר פגום שלא פועל טוב, יש להעבירו למעבדת היבואן לבדיקה.
7. יש להשתמש במכשיר במצב חימום בזירות על מנת להימנע מכוויות.
8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

## שמור על הוראות השימוש

כרית העיסוי נועדה לשימוש ביתי בלבד.

## חלקי כרית העיסוי

1. כרית עיסוי
2. ראשי עיסוי דו כיווני
3. שלט
4. כפתור הפעלה ON/OFF
5. כפתור לעיסוי בכיוון השעון
6. כפתור לעיסוי בכיוון נגד השעון
7. כפתור להפעלת מצב חימום
8. שנאי אלקטרוני

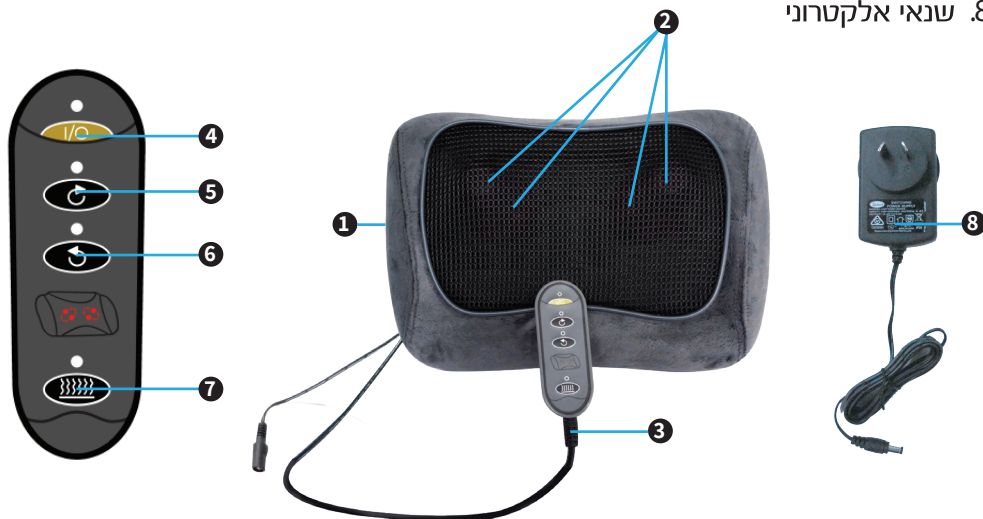

## הפעלת המכשיר

- יש לחבר את השנאי לכרית העיסוי
- יש לחבר את השנאי לשקע החשמל.
- הנח את כרית העיסוי על הכסא או הספה, השתמש ברצועה כדי למנוע תזוזת הכרית במהלך העיסוי.
- לחץ על כפתור ההפעלה (4) ON/OFF, נורית LED כחולה תדלק והכרית מוכנה לפעולה.
- לחיצה על כפתור עיסוי בכיוון השעון (5) , תדליק נורת LED כחולה בשלט, פעולת העיסוי תתחיל כאשר העיסוי יתבצע בכיוון השעון.
- לחיצה נוספת על הכפתור, נורית ה-LED הכחולה תכבה ופעולת העיסוי תפסק.
- לחיצה על כפתור לעיסוי בכיוון נגד השעון (6) , תדליק נורת LED כחולה בשלט, פעולת העיסוי תתחיל כאשר העיסוי יתבצע נגד כיוון השעון.
- לחיצה נוספת על הכפתור עיסוי בכיוון השעון (5) , נורית ה-LED הכחולה תכבה ופעולת העיסוי תפסק.
- לחיצה על כפתור החימום HEAT, תדליק נורת LED כחולה בשלט ותפעיל את מצב החימום, אינפרא אדום יפעל עם ראשי העיסוי.
- לחיצה נוספת על כפתור עיסוי בכיוון נגד השעון (6) , נורית ה-LED הכחולה תכבה ופעולת החימום תפסק.
- לחץ על כפתור ההפעלה (4) ON/OFF, נורית LED תכבה והכרית תעבור למצב המתנה.

## ניקוי ותחזוקת כרית העיסוי

### ניקוי

לפני ניקוי כרית העיסוי יש לוודא כי כרית העיסוי במצב כבוי (OFF) וכבל החשמל מנותק. יש לנגב את חלקי כרית העיסוי במטלית יבשה.

**אזהרה: אין לנקות את כרית העיסוי עם חומרי ניקוי ודטרגנטים חזקים.**

## תחזוקת כרית העיסוי

יש לוודא כי מתג ההפעלה מכובה והכבל ל מנותק משקע החשמל. יש לאחסן את כרית העיסוי בסביבה יבשה ולשמור עליו מפני אבק ואור שמש ישיר.

### מפרט טכני

שם המכשיר:	כרית עיסוי שיאצו מקצועי.
מקור מתח:	DC 12V, 1.5A
צריכה:	18W
מחזור הפעלה:	15 דקות הפעלה 10 דקות מנוחה.