


הוראות שימוש - מזרן עיסוי

1. סמן אזורי העיסוי: צוואר, גב עליון, גב תחתון, רגליים.
2. חמש תוכניות עיסוי.
3. שלוש עוצמות עיסוי: L - חלש, M - בינוני, H - חזק.
4. כפתור חימום - לחיצה מפעילה את מצב החימום, לחיצה נוספת מכבה את מצב החימום.
5. כפתור הפעלה - לחיצה על הכפתור מפעילה את מצב העיסוי, לחיצה נוספת מפסיקה את פעולת העיסוי.
6. כפתור לשינוי עוצמת העיסוי.
7. כפתור לשינוי אזורי העיסוי.
8. כיבוי אוטומטי לאחר 15 דקות.

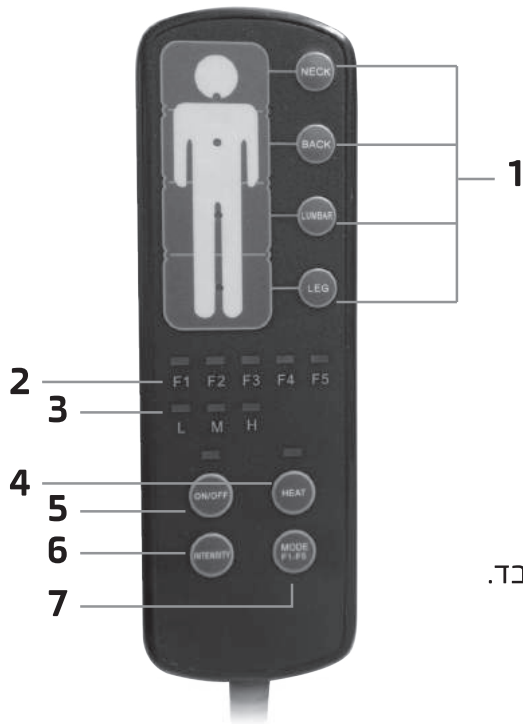

הוראות בטיחות

קרא בעיון את ההוראות לפני תחילת השימוש במזרן.

1. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, יש להחליפו במעבדת השירות של חברת מ. פיינגרש ושות' בע"מ בלבד.
2. לפני ההפעלה וודא שהתקע והשקע מאורקים כראוי.
3. השימוש אסור לילדים ללא השגחת מבוגר.
4. אין להשתמש במזרן בחדר האמבטיה
5. בסיום השימוש יש ללחוץ על כפתור ההפעלה להפסקת העיסוי ולנתק ממקור המתח.
6. אין להפעיל את המזרון בידיים רטובות.
7. לא להניח חפצים חדים על מזרן העיסוי.
8. אין להשתמש במזרן העיסוי במידה ויש נפיחות או זיהום בעור.
9. אין להשתמש במזרן העיסוי כתחליף לטיפול רפואי.
10. אין להשתמש במזרן לפני שינה.
11. השימוש אסור לאנשים מוגבלים שאינם מסוגלים להפעיל את השלט.
12. אין להשתמש במזרן העיסוי בזמן שינה.
13. אין להשתמש במזרן עיסוי רטוב.
14. לפעוטות ולאנשים רגישים לחום יש להיוועץ עם הרופא לפני השימוש.
15. אין להשתמש במזרן העיסוי במצב מקופל.

תחזוקה

1. אין להשתמש בחומרי ניקוי או מברשות כדי לנקות את המזרן.
2. לפני ניקוי המזרן יש לוודא כי המזרן מנותק ממקור מתח.
3. יש לנקות את המזרן בעזרת מטלית לחה.

נתונים טכניים

מידות מזרן העיסוי 170 ס"מ X 57 ס"מ
מתח ראשי V240
תדר HZ50
כניסת מתח V12-A1.0
הספק W12

היבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים

